

# INSTRUMENTS DENTO-VIRACTIS 57

*DENTO-VIRACTIS 57 est recommandé pour le nettoyage et la désinfection de l'instrumentation rotative, des fraises et des instruments à canaux. Il est adapté pour tous types de matériaux : acier, tungstène et fraises diamantées. DENTO-VIRACTIS 57 vous protège ainsi que vos patients de tous risques de contamination.*



## AVANT DE COMMENCER

- Mettre des gants appropriés.

## MODE D'EMPLOI

- Produit prêt à l'emploi
- Temps de contact : 15 minutes
- Rincer et essuyer
- Nettoyage en cuve à ultrasons, changer la solution au maximum toutes les 24 heures.

## ATTENTION


- Renouveler le bain de nettoyage après chaque utilisation. Circulaire n°138 du 14 mars 2001.
- Produit corrosif, pour les précautions d'emploi, se référer à la fiche de données de sécurité et à l'étiquette.
- Produit à usage externe, ne pas avaler.

## PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES


- Bactéricide : NF EN 1040, NFT 72-171/301, NFT 72-190.
- Fongicide : NF EN 1275 (Candida Albicans).
- Virucide : HIV, HBV, NFT 72-180.



25 Rue Bleue  
75009 Paris  
FRANCE

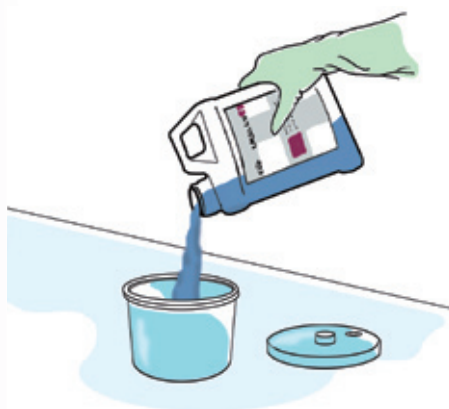

**1.** Versez **DENTO-VIRACTIS 57** directement dans le bac à fraises.

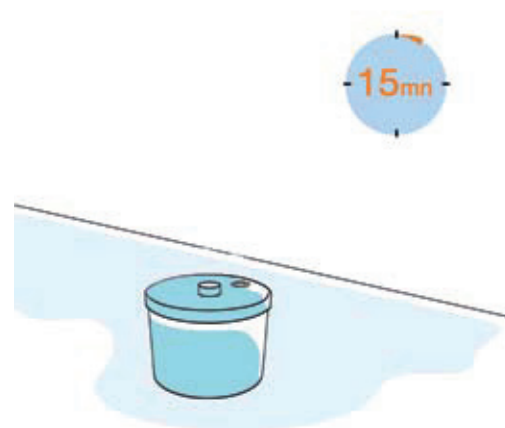

**2.** Immergez les fraises et laissez tremper 15 minutes.



**3.** Si besoin, brossez afin d'éliminer les résidus ; Rincez sous eau courante.



**4.** Essuyez avec un champ propre.

L'HYGIENE ABSOLUE